

AND

Эй энд Ди, Япония

Профессиональные технологии в медицине



**Автоматизация
процессов
медосмотра**




**Проведение
удаленных
медосмотров**



**Ведение
электронного
журнала**

Автоматизированный комплекс на базе тонометра ТМ-265Р
для проведения предрейсовых и предсменных
медосмотров рабочих, занятых на вредных
и опасных производствах

Схема автоматизации предсменных (предрейсовых) медосмотров на предприятии

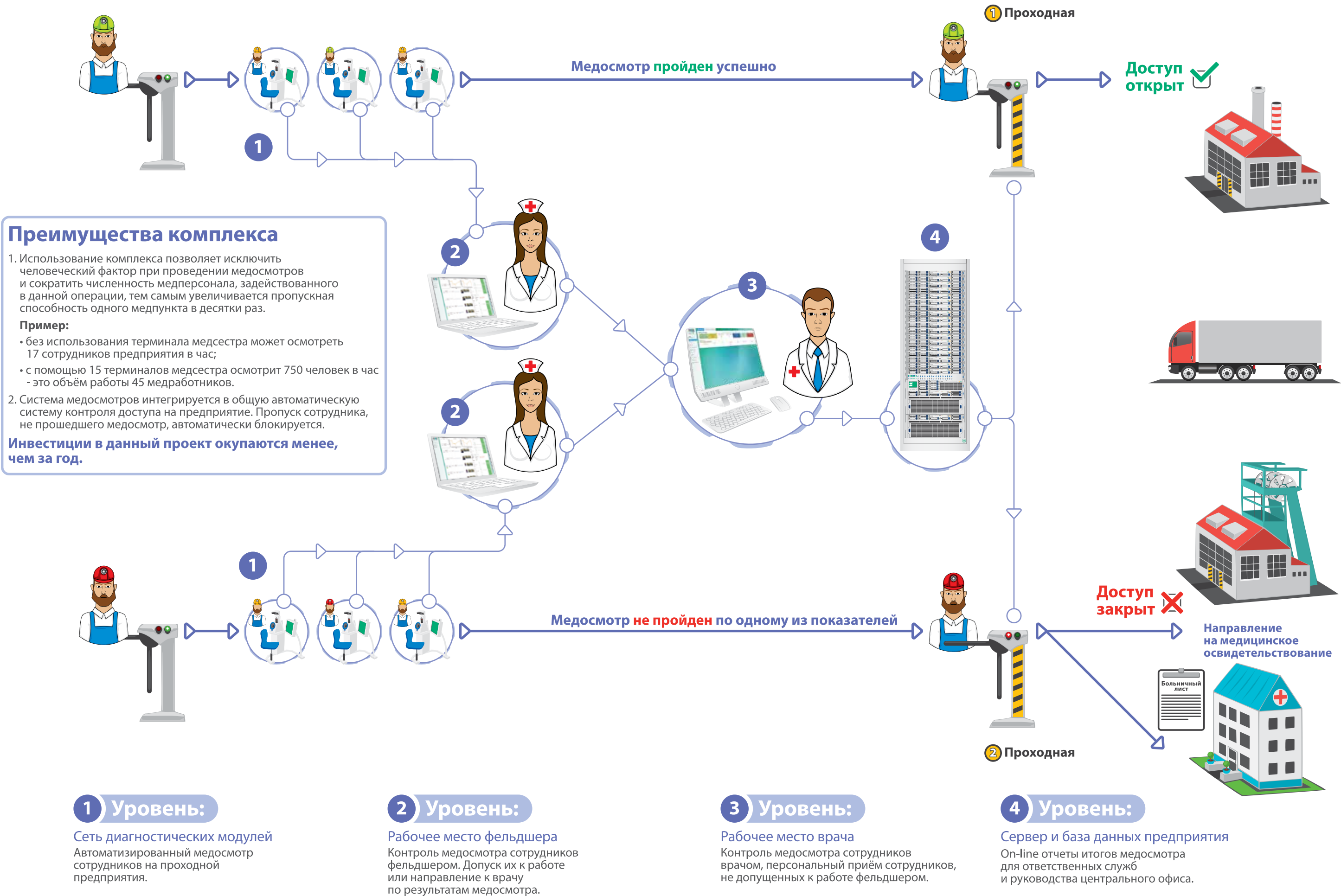

Преимущества комплекса на базе тонометра ТМ-2655Р:

- Ежедневный поточный скрининг (давление, пульс, алкогольное и наркотическое опьянение) большого количества сотрудников за короткий интервал времени
- Время обследования сотрудника не превышает 76 секунд
- Возможность интеграции с информационными системами заказчика: 1С, СКУД, SAP и др.
- Точность показаний и простота использования без участия медперсонала
- Долговечность, простота замены и низкая стоимость расходных материалов
- Формирование и распечатка любого отчета и журнала в соответствии с требованиями по охране труда
- Возможность дополнительного измерения температуры тела и веса

Этапы проведения медосмотра

с использованием комплекса на базе тонометра ТМ-2655Р

1 Этап

Идентификация сотрудника, проходящего медосмотр.

Идентификация сотрудника осуществляется внесением индивидуального табельного номера или посредством использования RFID-метки, карт HID или Emarin, считывания биометрических показателей и др.



2 Этап

Измерение АД, пульса и аритмии.

Измеритель артериального давления, пульса и аритмии за 45 секунд делает измерения и передает показания на компьютер контролирующего медосмотр фельдшера (врача). Сотрудник может проводить измерение в верхней одежде (кроме зимней).



3 Этап

Определение содержания алкоголя.

Алкометр за 15 секунд определяет уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе сотрудника и передает показания на компьютер контролирующего медосмотр фельдшера (врача). Исследование на алкоголь может проводиться без использования индивидуальных мундштуков-бесконтактным способом. Это значительно сокращает время исследования и его стоимость.



4 Этап

Диагностика присутствия наркотических веществ в организме.

Пупилометр за 6 секунд определяет факт нахождения сотрудника в состоянии наркотического опьянения и передает показания на компьютер контролирующего медосмотр фельдшера (врача).



В случае отрицательного результата осмотра доступ сотрудника на рабочее место блокируется.



Адрес: 121357, Москва, ул. Вереysкая, д. 17
Телефон: +7 (495) 937 3344
Факс: +7 (495) 937 5566
Сайты: www.and-rus.ru | www.aandd.ru

Данная реклама предназначена для распространения исключительно среди медицинских и фармацевтических работников на медицинских или фармацевтических выставках, семинарах, конференциях и иных подобных мероприятиях.