




TM-2441-16

Специализированное ПО
для анализа измерений

ПО для анализа измерений

(размещено для скачивания на сайте: www.and-rus.ru)

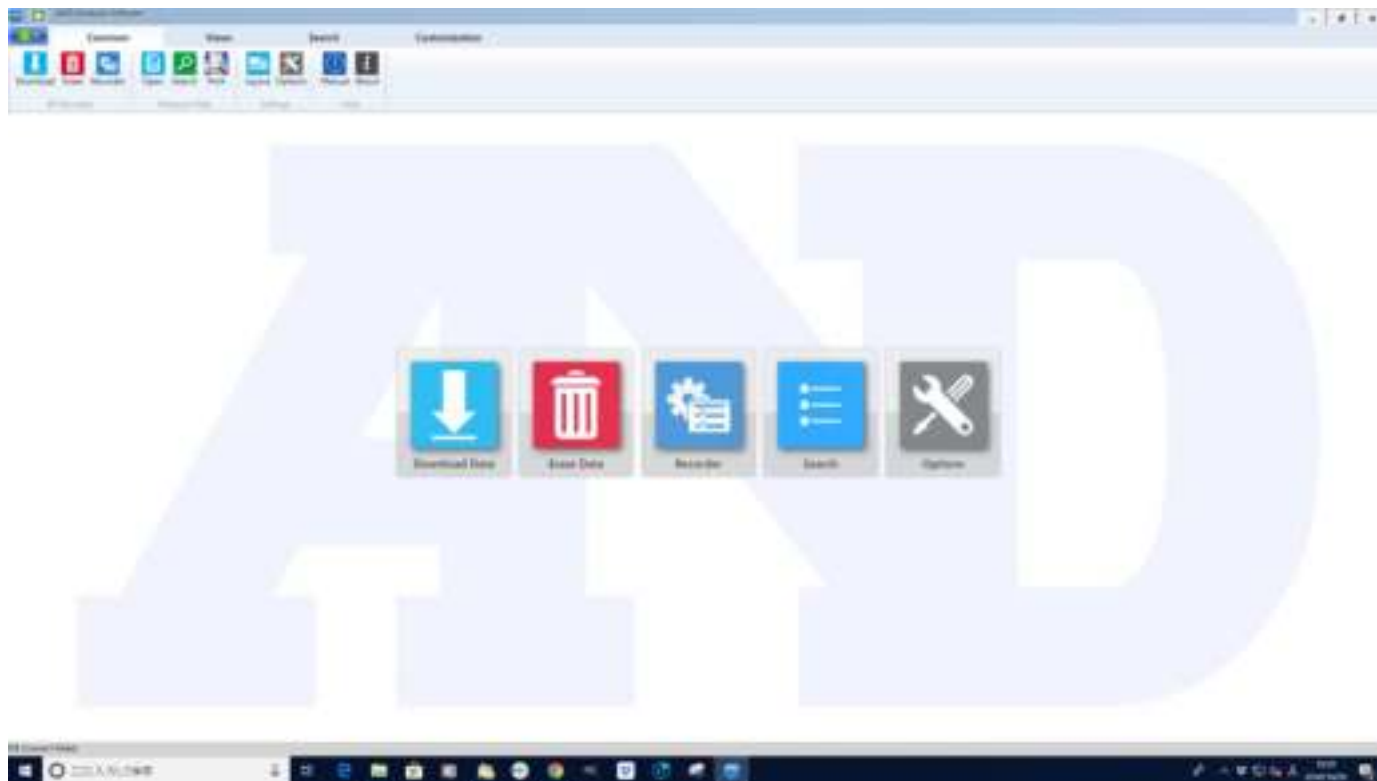

► Требования системы (минимальные параметры)

Процессор компьютера: процессор с тактовой частотой 1 ГГц

Память: 1 ГБ или больше (x86),
2 ГБ или больше (x64)

Операционная система (рекомендуется):

Windows 10 (x86/x64),

Windows 8 (x86),

Windows 7 (x86/x64)


SVGA: 800 × 600 пикселей

Жесткий диск:

доступное пространство 16 Гб (x86),

доступное пространство 24 Гб (x64)

Пример настройки устройства по времени проведения измерений

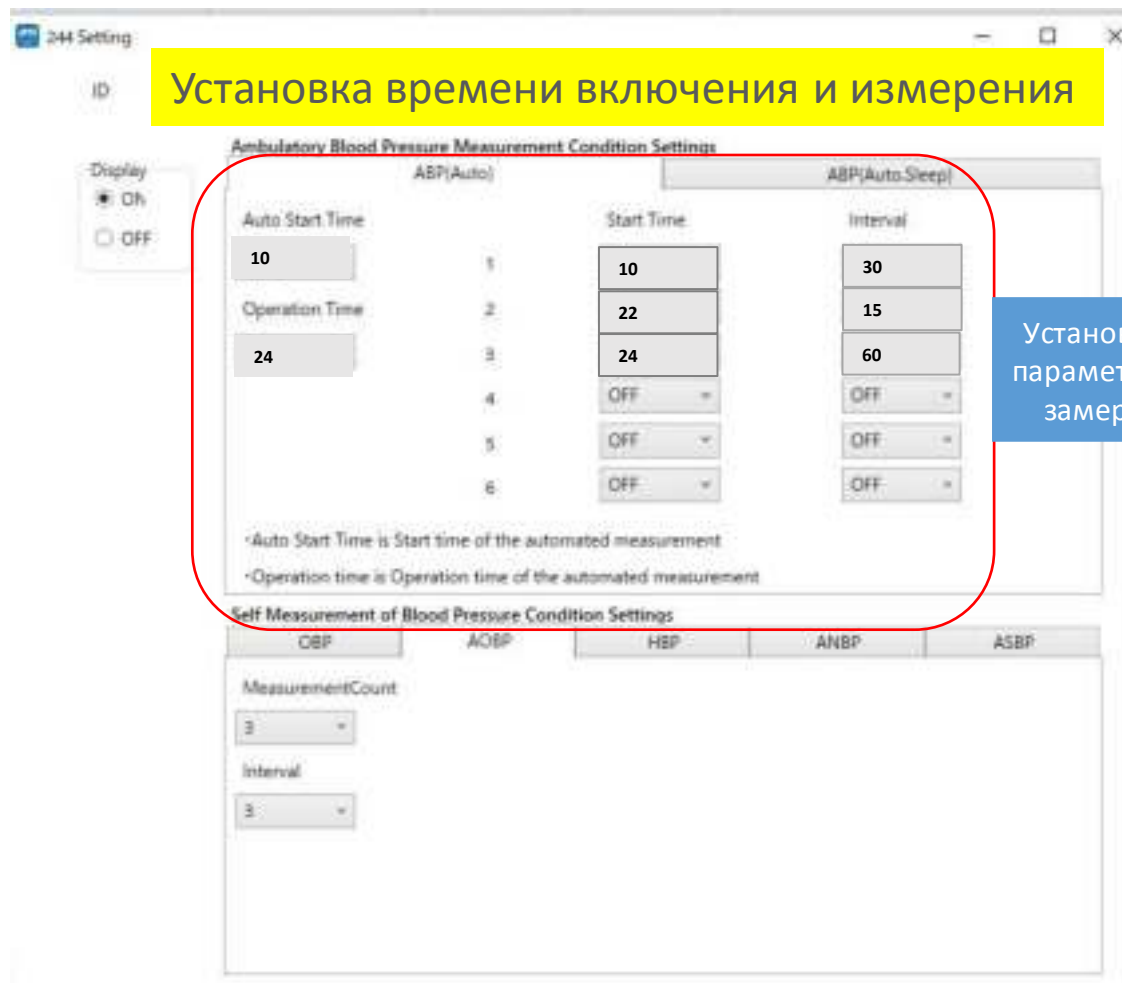


Установка
параметров
замера



Измерение	
1 st	10:00 (Start)
2 nd	10:30
3 rd	11:00
•	
•	
Last	9:00 (Auto stop)

Время включения = 10:00
Время работы = 24 (ч)

ПУСК

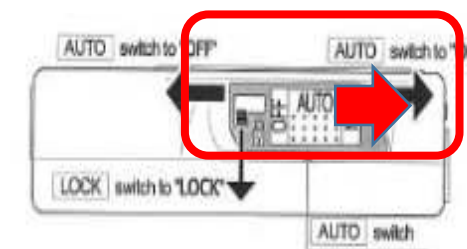

АВТО ползунковый переключатель
«ВКЛ» 9:50

СТОП

До 10:00 (Автопереключение на ВКЛ)	
Интервал 30 мин	•
	•
	•
Интервал 60 мин	9:00 (Автостоп)


Мультисенсорный анализ данных



► Использование нового встроенного мультисенсорного датчика вместе со специальным ПО позволяет анализировать данные об окружающей среде, в дополнение к данным измерений АД. Температура окружающей среды, атмосферное давление и активность пользователя могут быть отображены вместе с результатами артериального давления (только для модели TM-2441).

► Активность / Температура окружающей среды / Атмосферное давление (только для модели TM-2441).

Запись и отображение данных о форме пульсовой волны

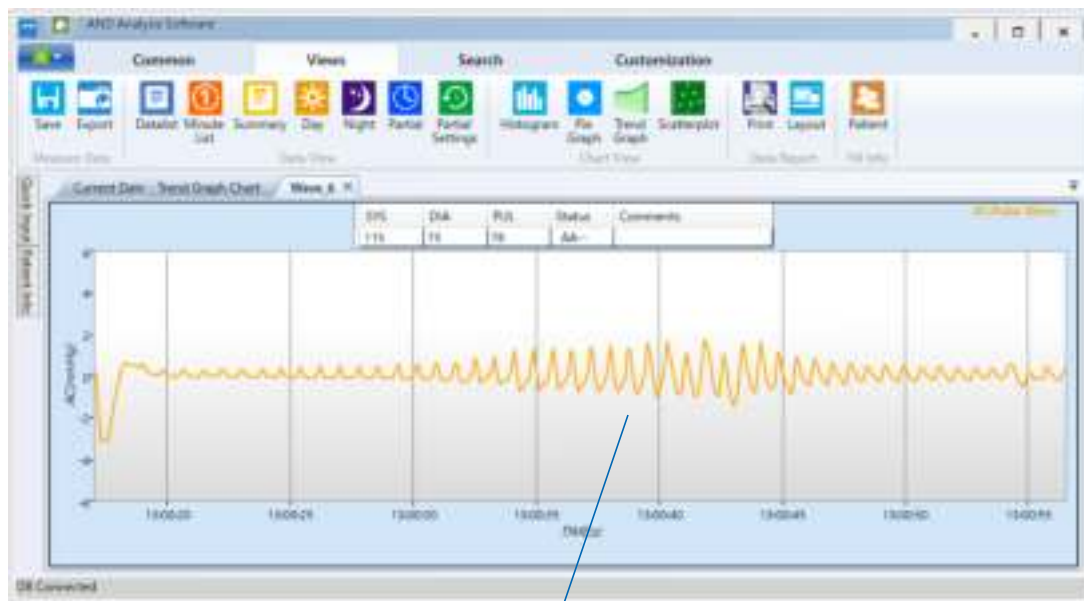

► Легко проверить нормальную измеряемую форму пульсовой волны

► Легко проверять сердечную аритмию и форму шумового сигнала

► ТМ-2440 / ТМ-2441 записывают данные по измерению АД в виде волны осциллометрической формы. С помощью программного обеспечения можно легко просматривать записи формы пульсовой волны для каждого измерения. Быстро определяется точность измеренных значений.

