

TM-2430

Clinically
Validated



- Суточный амбулаторный монитор артериального давления
- Легкий и компактный
- Осциллометрический метод измерения
- Питание от батареек (3 алкалиновые или Ni-Cd/Ni-Mn батарейки типа "AA")
- Вывод данных на ПК или принтер
- Подключение через RS-232C

Программное обеспечение EZ Doctor

- ♦ Работа в ОС Windows.
- ♦ Наглядное представление базы данных пациентов.
- ♦ Быстрый доступ к любым документам пациента (заключения, справки, анализы и т.д.).
- ♦ Программирование режимов работы монитора.
- ♦ Считывание данных с монитора и автоматическое удаление некорректных измерений.
- ♦ Наглядное представление полученных данных в виде графика и таблицы одновременно.
- ♦ Возможность изменения пограничных значений АД, используемых при анализе.
- ♦ Автоматическая обработка полученных данных, с возможностью ручной правки.
- ♦ Автоматический расчет всех наиболее информативных индексов, связанных с изменением АД и ЧСС.
- ♦ Возможность одновременного вывода 3 кратких отчетов на дисплей компьютера для сравнительного анализа (напр. до лечения и после)
- ♦ Автоматическая генерация отчета (полный анализ, анализ за сутки, анализ в выделенном врачом интервале) для вывода на принтер.



AND

A&D Medical
www.aandd.jp | www.and-rus.ru

Technology You Can Trust

Амбулаторный монитор артериального давления TM-2430

TM-2430 – это компактный и легкий амбулаторный монитор артериального давления, в котором реализованы наши последние технологические достижения, явившиеся результатом двадцатилетней деятельности в области разработки подобных приборов. Этот монитор прошёл тестирование в соответствии с протоколом Британского Гипертонического Общества (BHS), и его точность была признана соответствующей классу A/A. Масса прибора составляет всего 215 грамм, а его размер такой же, как у пачки сигарет. Таким образом, пациент может всегда иметь монитор TM-2430 при себе. Программное обеспечение WindowsTM Doctor Pro позволяет легко выполнить анализ результатов измерения.


Спецификация

Измерение артериального давления		
Диапазон измерений	Артериальное давление	40 – 280 мм рт.ст. (SYS – 60 – 280 мм рт.ст. / DIA – 40 – 160 мм рт.ст.)
	Пульс	30 – 200 ударов/сек
Точность	Артериальное давление	+/- 3 мм рт.ст.
	Пульс	
Накачка манжеты	Метод	+/- 5%
	Максимальное давление	Микро помпа
	Заданное давление	300 мм рт.ст.
Отсаска воздуха	Метод	Автоматическая установка
	Система безопасности	Управляемый электрический выпускной клапан (EECV) Магнитный соленоидный клапан открывается при достижении давления прибор. 320 мм рт.ст. При превышении уровня давления 330 мм рт.ст. независимый контур безопасности выпускает воздух из манжеты.
Установка интервалов		5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 мин.
Часы		Время – 24-часовой режим, календарь (~ год 2096)
Запоминание данных		До 300 комплектов данных
Источник питания	Батареи	3 батареи x LR6 ("AA") – щелочные или Ni-Cd
	Срок службы батареек	Прибл. 200 измерений
Температура и влажность	Рабочая температура	10°C – 40°C, 0RH < 85% (без конденсации)
	Хранение и транспортировка	-20°C – 55°C, 0RH < 95% (без конденсации)
Габариты		72 x 27 x 100 мм
Масса		Прибл. 215г без манжеты

EZ Doctor

Программное обеспечение WindowsTM

Руссифицированное программное обеспечение было разработано для того, чтобы облегчить процедуру диагностирования на базе результатов измерений, выполненных при помощи наших амбулаторных мониторов АД (TM-2430), и тем самым повысить качество лечения.

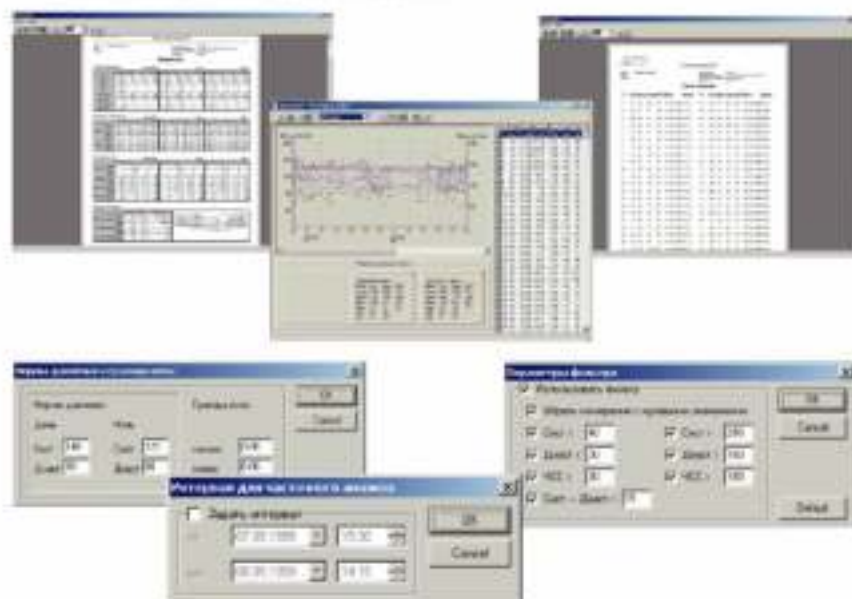

Опции и аксессуары

TM2430-02A	большая манжета на левое плечо (28-36см)
TM2430-06A	манжета для взрослых пользователей на левое плечо (20-31см)
TM2430-07A	малая манжета на левое плечо (15-22см)
TM2430-09A	манжета для взрослых пользователей на правое плечо (20-31см)

печатающий терминал



Системные требования

CPU	Эквивалент Intel 80486DX или выше
RAM	Не менее 16 Мб
Операционная система	Windows 95/98/ME, Windows NT4/0/2000/XP
Монитор	SVGA (800 x 600), 256 цветов или более
Периферийные устройства	Дискетод 3.5"/ 1.44 Мб, CD-ROM
Жесткий диск	1.5 Мб
Серийный порт	Стандартный порт RS-232C

Представительство в России:

ООО «Эй энд Ди Рус», дочерняя компания «Эй энд Ди», Токио, Япония
121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 112 квартал Нунцево
Телефон: [7] /495/ 937-33-44 Факс: [7] /495/ 937-55-66
www.and-rus.ru, www.aandd.jp

A&D Company Ltd., Japan

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone: [81](3) 5391-6132 Fax: [81](3) 5391-6148
http://www.aandd.jp

AND

Качество – основной критерий!

Ваш дилер